

Arquivo de dados C:\CHEM32\1\DATA\TESTE biotina -b9 2026-05-15 15-00-44\009-00901.D

Nome da amostra: Biotina

Operador de aquisição: EDSON Linha de sequência: 9

Instrumento de aquisição: Instrumento 1 Localização: Frasco 5

Data da injeção: 25/04/2025 12:25:09 Injeções: 1

Volume injetado: 10,0 µl

Método de aquisição: BIOTINA.M

Última alteração: 23/04/2025 às 08:27:30 por EDSON

Método de análise: C:\CHEM32\1\METHODS\BIOTINA.M

Última alteração: 25/04/2025 às 09:51:12 por EDSON

DAD1 A, Sig=200,4 Ref=360,130 (C:\CHEM32\1\DATA\TESTE biotina -b9 2026-05-15 15-00-

Relatório de Normas Externas

Ordenado por: Sinal

Calibr. Data de modificação: quinta-feira, 24 de abril de 2025, 18:00:25

Multiplicador: 1,0000

Diluição: 1,0000

Utilize o Multiplicador e o Fator de Diluição com os Padrões Internos de Diluição (ISTDs).

Sinal 1: DAD1 A, Sig=200,4 Ref=360,130

Tipo de tempo de retorno	Área	Valor/Quantidade da área	Nome do grupo
[min]	[mAU*s]	[ug/ml]	

3,778	BB	1058,79917	1,54300e-2	25,00000	Biotina
-------	----	------------	------------	----------	---------

Totais: 25.00000

Tabela de Calibração – Biotina

Calibr. Data de modificação: quinta-feira, 24 de abril de 2025, 18:00:25

Tipo de curva: Linear

Origem: Incluída

Peso: Igual

Sinal 1: DAD1 A, Sig=200,4 Ref=360,130

Tempo de Retorno	Nível	Quantidade	Área	Quantidade/Área	Ref.	Nome do Grupo
[min]	Sig	[ug/ml]				

3,800	1	1	10,00000	296,16348	3,37651e-2	Biotina
2	25.00000	620.81195	4.02698e-2			
3	50.00000	1286.75647	3.88574e-2			
4	70,00000	1737,21973	4,02943e-2			
5	100.00000	2530.36230	3.95200e-2			

Curvas de Calibração – Biotina

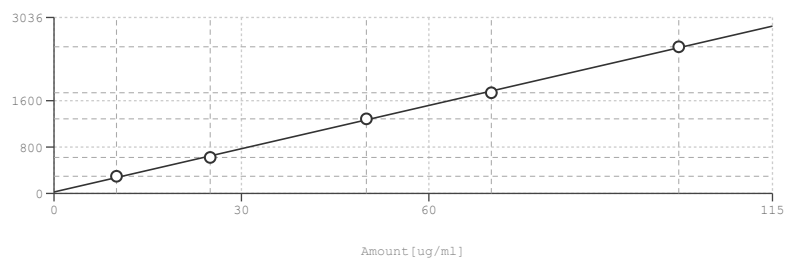
Área

Biotina em RT exp.: 3.800

DAD1 A, Sig=200,4 Ref=360,130

Correlação: 0,99958

Desvio padrão residual: 29,80411

Fórmula: $y = mx + b$

m: 24,88757

b: 24,99672

x: Quantidade

y: Área

1 = 10 ug/ml 2 = 25 ug/ml 3 = 50 ug/ml 4 = 70 ug/ml 5 = 100 ug/ml

*** Fim do relatório ***

Instrumento 1 26/04/2025 14:11:37 EDSON

Página 1 de 1

Agilent ChemStation para sistemas LC e LC/MS Rev. B.04.03 [16] Copyright (c) Agilent Technologies